




2x



## Főbb jellemzők

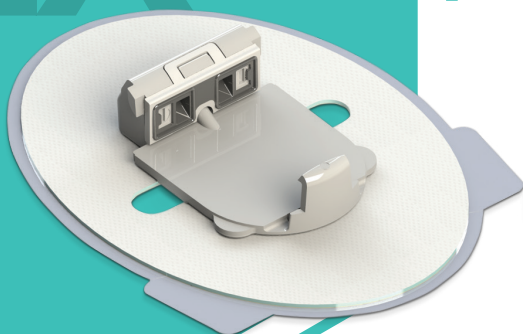

14 napos szenzor  
élettartam



Vezetőtű (trokár)  
nélküli szenzor  
behelyezés



Valós idejű  
felhőadatok



Egy új adat  
percenként



Egyénre szabható  
figyelmeztetések  
(riasztások)




Környezetbarát

---

A GlucoMen® Day CGM valós idejű szubkután folyamatos cukor-monitorozó rendszer. Az egyedülálló GlucoMen® Day CGM érzékelő technológiának köszönhetően az apró érzékelőhuzal vezetőtű (trokár) nélkül kerül a bőr alá, csökkentve a behelyezési fájdalom és vérzés kockázatát.

Az elektrokémiai érzékelő 14 napig méri a glükózsintet, az adatokat a jeladó Bluetooth kapcsolaton keresztül elküldi a GlucoMen® Day applikációba, amely percenként új cukorértéket jelenít meg.

# A **Glucomen<sup>®</sup> Day<sub>CGM</sub>** Folyamatos Cukormonitorozási Rendszer felépítése és működése


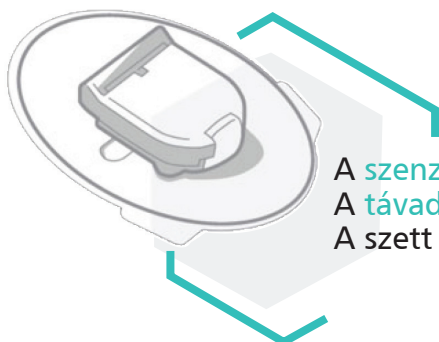


A **szenzor** 14 napig használható.  
A **távadó** adatokat küld a GlucoMen<sup>®</sup> Day applikációba.  
A szett 2 db távadót tartalmaz.

A GlucoMen<sup>®</sup> Day **applikáció** percenként új glükózértéket jelenít meg, és a beállításoknak megfelelő riasztásokat küld.




A **töltő** a távadó 14 naponkénti feltöltését teszi lehetővé.

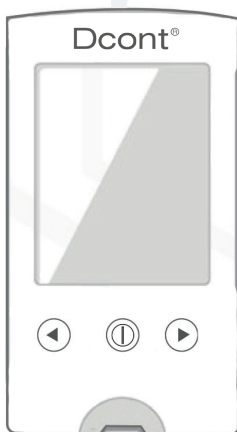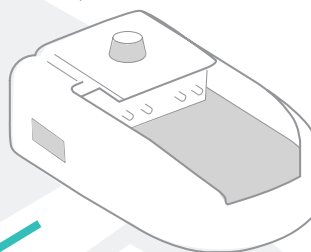

A GlucoMen<sup>®</sup> Day CGM-et a **Dcont<sup>®</sup>** vércukormérő készülékekkel javasolt kalibrálni.

A **szenzor beillesztő eszköz** ergonomikus kialakítású, könnyen használható. Fájdalommentes, vezetőtű (trokár) nélküli behelyezést tesz lehetővé.

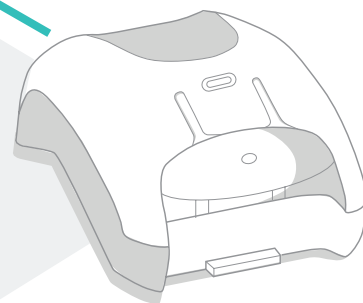



A GlucoMen® Day applikáció Android és iOS okostelefonokra egyaránt percenként megjeleníti a legújabb glükózértéket, a trend nyilat és a glükóz grafikont. Az adatok valós időben megoszthatók az arra jogosult egészségügyi szakemberrel.



Szenzor Specifikáció	Leírás
Cukor tartomány	2.2–22.2 mmol/L
Szenzor élettartam	max. 14 nap
Kalibráció	Dcont® Etalon, Dcont® Novum
Kalibrálási tartomány	3.9–13.9 mmol/L
Tárolási hőmérséklet	5°C - 35°C

Távadó Specifikáció	Leírás
Távadó akkumulátor típusa	újratölthető lítium-ion akkumulátor
Távadó akkumulátor élettartama	14 nap
Távadó adattárolása	14 nap
A távadó méretei	33 x 24 x 9 mm
A távadó súlya	5 gramm
Tárolási hőmérséklet	5°C - 45°C
Beolvasási frekvencia	Percenként

A termék gyógyászati segédeszköz.



A GlucoMen® Day forgalmazója:

**77 ELEKTRONIKA KFT.**

/ H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

/ CGMS ZÖLDSZÁM +36/80 88 00 77

/ [www.cgms.hu](http://www.cgms.hu)

CGM-9301-3

Lezárás dátuma:  
2022.02.18.